

# POLMIL

## PULSOKSYMETR NAPALCOWY

Pulsoksymetr napalcowy 500D (OLED) jest przeznaczony do pomiaru ilości natlenionej hemoglobiny we krwi w zadanym czasie. W urządzeniu została zastosowana fotoelektryczna technologia kontroli oksyhemoglobiny zgodna z technologią skanowania i zapisu wielkości impulsu, którą można stosować do pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny oraz tętna u ludzi poprzez palec. Urządzenie można stosować jako element codziennej opieki w domu, szpitalu, barach tlenowych, ośrodkach zdrowia, w opiece fizycznej w sporcie, itp. Produkt może być stosowany przed lub po aktywności fizycznej.



JPD-500D  
OLED Version



Pomiar SpO2



Pomiar tętna



Regulacja  
jasności  
ekranu




Alarm



Automatyczne  
wyłączenie

### Produkt odpowiedni dla każdego

Zaprojektowany dla entuzjastów sportu, lotników, rowerzystów, wspinaczy górskich czy osób, które chcą mieć pod kontrolą swoją saturację i tętno.

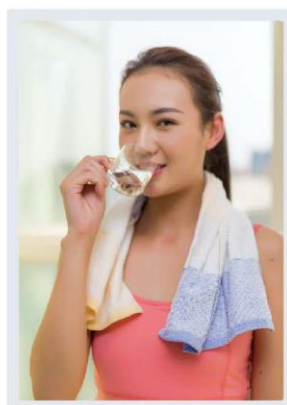



- Symbol tętna
- Wskaźnik perfuzji
- Wskaźnik stanu baterii
- Symbol saturacji

- Wykres słupkowy tętna
- Wartość tętna
- Pletyzmogram
- Wartość saturacji

### Ekran z regulacją jasności



### Pletyzmograf i wskaźnik perfuzji (PI)



### Dla różnych wielkości palców



## SPECYFIKACJA

Wyświetlacz	OLED
Parametry	Tętno, SpO <sub>2</sub> , PI (wskaźnik perfuzji)
Dokładność pomiaru	SpO <sub>2</sub> : 70-100%, ± 2%; Tętno: 25-250, ± 2% bpm
Wskaźniki	Stan baterii w czasie rzeczywistym, przypomnienie dla limitu wartości
Zastosowanie	Dorośli, młodzież
Bateria	2 x AAA
Wymiary	62 x 37 x 33,1 mm
Waga z bateriami	42,5 g
Certyfikacja	FDA & CE

## AKCESORIA

- 1 x łatwe w transporcie etui
- 2 x baterie AAA
- 1 x smycz
- 1 x instrukcja obsługi

WIELKOŚĆ KONT. (CM)	ILOŚĆ/KONT.	WAGA BRUTTO (KG)	FCL/20
46 x 28 x 29	100	9	680



## POLMIL

Importer i dystrybutor:  
**POLMIL Sp. z o.o. S.K.A** ul. Przemysłowa 8, Bydgoszcz 85-758, Polska  
 Tel. +48 52 348 67 66 Fax +48 52 348 68 34  
[handlowy@polmil.pl](mailto:handlowy@polmil.pl) [www.polmil.pl](http://www.polmil.pl)