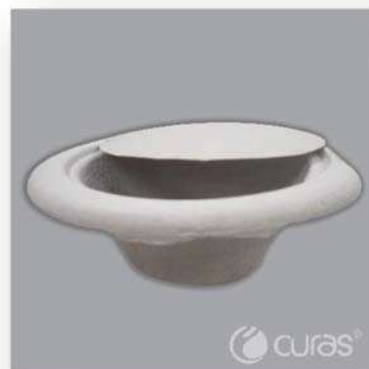


KARTA PRODUKTOWA

Jednorazowa miska ogólnego zastosowania z przykrywką, 1 l WardPak™

Marka	:	CURAS®
Kategoria	:	Pielęgniarstwo/opieka
Zakres	:	Hygiene Pulp™
Grupa produktowa:	:	Naczynia ogólnego zastosowania
NR REF.	:	08031

**OPIS PRODUKTU**

Jednorazowa miska ogólnego zastosowania z pulpy higienicznej o właściwościach wodoodpornych. Pojemność - 1 l. Do utylizacji w maceratorze. Wyposażona w przykrywkę do zastosowania w sytuacjach awaryjnych. Opakowanie WardPak™ dla łatwego użytkowania. Niesterylna.

PRZEZNACZENIE

Jednorazowa miska ogólnego zastosowania do gromadzenia płynnej zawartości i wymiocin oraz do różnych innych celów, np. do higieny jamy ustnej oraz odprowadzania moczu z worka na mocz/systemu odprowadzania moczu. Produkt jednorazowego użytku.

CECHY I ZALETY

- Produkt ekologiczny wykonany w całości z przetworzonej makulatury gazetowej.
- Produkt jednorazowy w celu ograniczenia ryzyka zakażenia krzyżowego oraz zakażeń szpitalnych.
- Co najmniej 4 godziny wodoodporności (dotyczy tylko miski).
- Skala wskazująca przybliżoną objętość.
- Wzmocniony spód dla dodatkowej stabilności miski na płaskiej powierzchni.
- Szerszy, wzmocniony brzeg ułatwiający trzymanie i przenoszenie pełnej miski.
- Zaprojektowana w sposób umożliwiający ułożenie w stos dla łatwości składowania i ograniczenia zajmowanego miejsca.
- Opakowanie wewnętrzne WardPak™ chroni produkt przed kurzem i zanieczyszczeniem.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NR REF.	Pojemność	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Średnia waga/szt.	Opakowanie
08031	1 l	22,8 ø x 7,6 cm (H)	32 g ± 2 g	WardPak™

Skład

- Miska wykonana w całości z przetworzonej makulatury gazetowej w połączeniu z mieszanką wodną odporną na płyny.
- Przykrywka wykonana z tektury.

Kraj pochodzenia

- Chiny

Sterylizacja

- Niesterylna.
- Możliwość sterylizacji z użyciem tlenku etylenu (ETO) lub promieni gamma.

Okres przydatności do użycia

- Miska z przykrywką: 5 lat

Wybrane normy i wytyczne

- Dyrektywa MDD 93/42/EWG (Oznakowanie CE, Klasa I), zmieniona Dyrektywą 2007/47/WE.
- ISO 9001:2008
- PAS29:1999 Próba odporności na plyn przez okres co najmniej 4 godzin (temperatura wody 35°C±3°C).
- PAS29:1999 Próba maceracji przy użyciu maceratora stosowanego w pokoju-śluzie, cykl normalny.

Zalecane warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wystawiania produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła oraz zapłonu.

Proponowana metoda utylizacji

- W przypadku standardowych odpadów, zużyty produkt należy utylizować w maceratorze lub zgodnie z lokalnym protokołem dot. odpadów. W przypadku braku maceratora, należy spalić lub wywieźć na składowisko odpadów.
- W przypadku zanieczyszczonej lub zakażonej zawartości, produkt należy traktować jak odpad medyczny oraz utylizować zgodnie z protokołem dot. odpadów medycznych.

Symbole produktu



curas.com/Symbols

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA

NR REF.	Kod kreskowy EAN-13	WardPak™	Karton	Masa brutto
08031	5051400080319	100 szt./op.	Miska: 400 szt. / karton Przykrywka: 10 szt. / karton	~14 kg

Komponenty/Właściwości materiałów			Zalecenia dot. utylizacji odpadów				
Opakowanie	Materiał	Zawiera PCW	Spalenie	Wysypisko	Macerator	Recykling	Ponowne użycie
WardPak™	PE	--	✓	(✓)		✓	
Karton zewnętrzny	Tektura falista	--	(✓)	(✓)		✓	
Paleta transportowa	Drewno	--				(✓)	✓

✓ = Wysoce zalecane

(✓) = Zalecane

INFORMACJE DODATKOWE

- Produkty Curas® Hygiene Pulp™ zostały poddane kontroli w kilku modelach maceratorów i spełniają wymagania rekomendowanych procedur operacyjnych.
- Kod HS: 4823709000
- Dokumentacja dostępna na życzenie. Kontakt: info@curas.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

POLMIL

POLMIL Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8b

85-758 Bydgoszcz

tel. +48 52 348 67 66, fax. +48 52 348 68 34

handlowy@polmil.pl www.polmil.pl